




GUIDA RAPIDA

all'utilizzo di FreeStyle Libre 3 Plus

Il sensore FreeStyle Libre 3 Plus monitora il tuo glucosio in tempo reale minuto per minuto così puoi sapere quando il glucosio è troppo basso o troppo alto e fare scelte consapevoli.

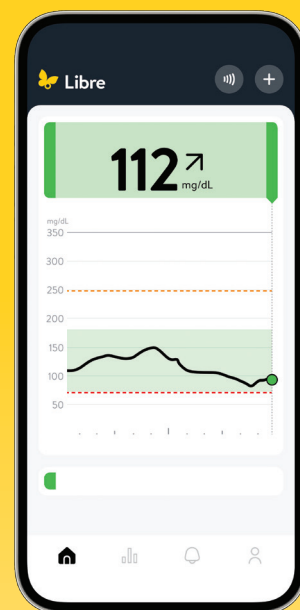

- 

Le **letture del glucosio** si aggiornano **automaticamente ogni minuto**
- 

Memorizzazione automatica dei **valori del glucosio** rilevati dal sensore anche quando non c'è connessione internet, anche nel caso in cui il sensore si scollega dall'app
- 

Il sensore è in grado di inviare i dati fino a 10 metri di distanza senza ostacoli.
È necessario attivare il Bluetooth sul proprio cellulare per utilizzare FreeStyle Libre 3 Plus
- 

Il sensore FreeStyle Libre 3 Plus è sottile, piccolo e discreto
- 

Durata fino a 15 giorni
- 

Nessuna puntura del dito per la calibrazione
Il sensore è calibrato in fabbrica
- 

Approvato a partire dai 2 anni
- 

Accuratezza
Letture del glucosio vicine ai valori del glucosio ematico
- 

Allarmi del glucosio
Gli allarmi del glucosio ti avvisano quando i tuoi valori sono troppo bassi o troppo alti o quando si verifica una perdita di segnale
- 

Con l'aiuto della piattaforma **LibreView** e dell'app **LibreLinkUp** puoi condividere facilmente i tuoi valori del glucosio con il medico e con i familiari
- 

Pensato per essere integrato con i microinfusori

 **Se stai utilizzando il sensore FreeStyle Libre 3 Plus con il microinfusore non attivare il sensore con l'app Libre. Visita il sito dell'azienda che produce il microinfusore per conoscere le istruzioni di attivazione e verificare la compatibilità tra i sistemi.**

Descrizione del sistema 4

Impostazione dell'app 5

Applicazione del sensore 6

Avvio del sensore..... 7

Comprensione dei valori del glucosio 8

Comprensione dei rapporti sul glucosio 9

Impostazione degli allarmi del glucosio..... 10

Come condividere i dati del glucosio con il medico 11

Condivisione dei livelli di glucosio con i tuoi cari 12

Come migliorare l'adesione del sensore 13

Rimozione e sostituzione del sensore 14

Programma “My FreeStyle” 15



Il sistema FreeStyle Libre 3 è composto dal sensore e dall'app sul tuo cellulare¹

1



Il sensore è inserito direttamente all'interno dell'**applicatore**. Utilizza l'applicatore per applicare il sensore sul retro del braccio nella parte superiore. Il sensore ha una durata fino a 15 giorni¹.

Sensore FreeStyle Libre 3 Plus
Piccolo e discreto paragonabile ad una moneta da 5 centesimi.
Facile da applicare
Resistente all'acqua², quindi indossabile anche durante la doccia, il nuoto o l'allenamento.



2

Usa l'app **Libre³** per avviare il sensore, ricevere i valori del glucosio, ricevere gli allarmi sul glucosio, visualizzare lo storico del glucosio e le tue note.

Tutto in un'unica app di semplice utilizzo.



Per iniziare scarica l'app Libre

Un'unica app per tutti i sensori FreeStyle Libre¹



- 1 Scarica l'app Libre da App Store o da Google Play, poi clicca sull'icona per aprire l'app.



Se hai già un sensore attivo, continua a usarlo con l'app attuale finché non sarà il momento di sostituirlo. Potrai utilizzare l'app Libre per avviare un nuovo sensore.

- 2 Rivedi e accetta i permessi necessari.



- 3 Se hai già un account LibreView accedi con le tue credenziali (email e password). I tuoi dati sul glucosio verranno trasferiti automaticamente sull'app Libre. Se non hai un account puoi crearlo in pochi minuti.



Se cambi cellulare, puoi sempre accedere all'app tramite il tuo account LibreView e le tue informazioni saranno sempre con te.

- 4 Completa la configurazione dell'app passo dopo passo.

- 5 Ora puoi avviare il tuo sensore.



L'app Libre è ora disponibile anche sul tuo smartwatch^{2,3}

- Con un **rapido movimento del polso** puoi vedere valori, trend e notifiche, senza usare il cellulare.
- Puoi ricevere le **notifiche** degli **allarmi sul glucosio**.
- Puoi **scegliere tra diversi stili di visualizzazione** quello più adatto a te.

SCARICA L'APP LIBRE

Scansiona il **QR code** per scaricare l'app sul tuo cellulare.




Per ricevere assistenza tecnica sull'app puoi contattare il **numero verde gratuito 800 693 000**

1. Rimuovere il sensore se si è sottoposti a esami radiologici: TAC, RX e risonanza magnetica. 2. Il sensore è resistente all'acqua fino a 1 metro di profondità. Non immergerlo per più di 30 minuti. 3. L'app Libre è compatibile con i sistemi FreeStyle Libre 2 e FreeStyle Libre 3. L'utilizzo dell'app Libre richiede la registrazione a LibreView.

1. L'app Libre è compatibile con i sensori FreeStyle Libre 2, FreeStyle Libre 2 Plus, FreeStyle Libre 3 e FreeStyle Libre 3 Plus. 2. L'app Libre per smartwatch è compatibile solo con determinati dispositivi e sistemi operativi. Prima di utilizzare l'app, ti invitiamo a consultare il nostro sito web FreeStyle.Abbott per maggiori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi. L'app Libre per smartwatch non deve essere utilizzata per prendere decisioni terapeutiche. 3. Le informazioni e le notifiche sul glucosio vengono ricevute solo quando il cellulare si trova nel raggio di comunicazione del sensore e dello smartwatch. È necessario abilitare le impostazioni appropriate sul cellulare per ricevere gli allarmi sullo smartwatch. Se ci sono accessori collegati al telefono (come cuffie wireless o smartwatch) l'allarme potrebbe essere ricevuto su un solo dispositivo, non su tutti.

Monitoraggio del glucosio FreeStyle Libre 3

Il sensore FreeStyle Libre 3 Plus misura, in modo continuativo, il glucosio nel fluido interstiziale, un liquido che circonda le cellule sotto la pelle. Il ritardo nella risposta del glucosio del fluido interstiziale alle variazioni della glicemia è di circa 5 minuti.

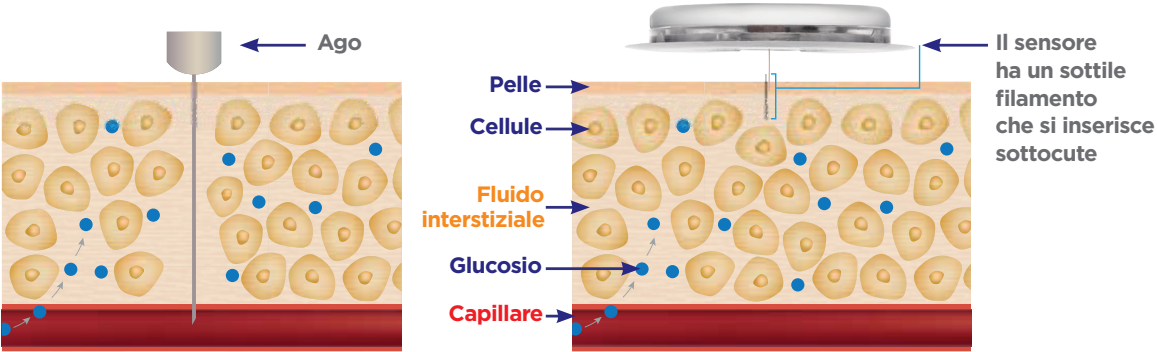

Disegno unicamente a scopo illustrativo

3 Passaggi per applicare il sensore FreeStyle Libre 3 Plus

Il sensore è inserito direttamente all'interno dell'applicatore.



- Lava, pulisci e asciuga**
Seleziona un'area sulla **parte posteriore del braccio** che rimanga distesa durante le normali attività. Detergi con **acqua e sapone**, **non idratante e privo di profumo**. Disinfetta la pelle con una salvietta imbevuta di alcol e **lascia asciugare all'aria** prima di procedere. Questo passaggio è fondamentale per far aderire bene il sensore.

Nota: Si consiglia di non utilizzare gel igienizzanti per pulire la zona di applicazione del sensore. I peli possono ridurre la capacità di adesione del sensore. Rasa i peli in eccesso prima di applicare il sensore.




- Apri l'applicatore**
Svita il cappuccio dall'applicatore, riponilo da parte e posiziona l'applicatore sulla parte posteriore del braccio.

NON rimontare il cappuccio perché potrebbe danneggiare il sensore.




- Applica**
Applica il sensore sulla parte posteriore del braccio premendo con decisione. Devi sentire un clic. Attendi alcuni secondi e poi rimuovi l'applicatore lentamente, lasciando il sensore sulla pelle.

Avvia il sensore con il tuo cellulare¹

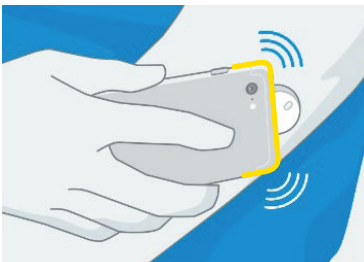

IPHONE:
L'**antenna NFC** si trova sul **BORDO SUPERIORE** del cellulare. Per eseguire la scansione apri l'app Libre, tocca il pulsante di scansione in alto a destra e avvicina il bordo superiore del cellulare al sensore. Quando il sensore è stato avviato correttamente il cellulare emette un segnale acustico e una vibrazione.

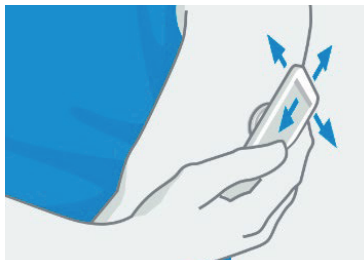

ANDROID:
L'**antenna NFC** si trova sul **RETRO** della maggior parte dei cellulari Android. Per eseguire la scansione apri l'app Libre, tocca il pulsante di scansione in alto a destra e avvicina la parte posteriore del cellulare al sensore. Dopo aver avviato correttamente il sensore, il cellulare emetterà un segnale acustico e una vibrazione.

Se viene visualizzato il messaggio di errore scansione ripetere la scansione fino a quando il sensore non verrà attivato correttamente. I modelli di cellulare sono tutti diversi. Se necessario, muovi lentamente il cellulare sul sensore. Potrebbe essere necessario attivare la funzione NFC nelle impostazioni del telefono. È necessaria una sola scansione per avviare il sensore. I valori del glucosio vengono visualizzati in automatico minuto-per-minuto direttamente sul tuo cellulare senza necessità di scansione il sensore.

Sono necessari 60 minuti per attivare il sensore e iniziare a visualizzare i valori del glucosio. Un conto alla rovescia nell'app indicherà il tempo di attesa rimanente.



Durante l'attivazione del sensore puoi continuare ad utilizzare il cellulare. Quando il sensore è pronto riceverai automaticamente una notifica, se le notifiche sono attivate.

1. L'app Libre è compatibile solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Sul sito FreeStyle.Abbott è possibile consultare la guida sulla compatibilità dei dispositivi, accedendo alla sezione "Supporto/Tutorial" del menù principale.


Quali informazioni si visualizzano

Letture del glucosio in tempo reale sul tuo cellulare e ora anche su smartwatch

Grafico del glucosio interattivo e scorrevole per vedere i dati del glucosio delle ultime 24 ore a intervalli di 5 minuti

Giorni al termine del sensore

Barra di navigazione per trovare facilmente le informazioni che ti servono

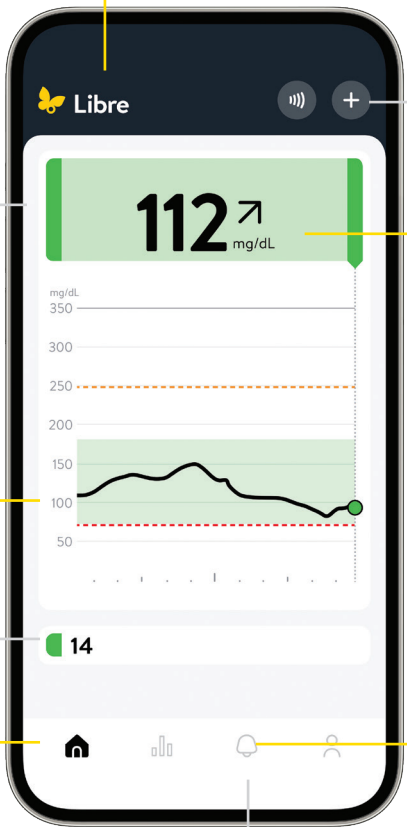

Un'unica app per tutti i sensori FreeStyle Libre¹

Aggiungi facilmente note su cibo, attività fisica e terapia

Freccia di andamento del glucosio

Allarmi discreti e progressivi, pensati per adattarsi alle tue esigenze

Modalità silenziosa fino a 9 ore

Allarmi predittivi



Il valore attuale del glucosio determina il colore di sfondo dello schermo del telefono

ARANCIONE

Glucosio alto (superiore a 250 mg/dL)

VERDE

Nell'intervallo stabilito del glucosio

GIALLO

Tra l'intervallo stabilito del glucosio e un livello di glucosio alto o basso

ROSSO

Glucosio basso (inferiore a 70 mg/dL se standard)

FRECCHE DI ANDAMENTO

Grazie alle frecce di andamento del glucosio è possibile visualizzare in che direzione e quanto rapidamente i valori del glucosio si stanno muovendo. Le frecce possono aiutarti ad analizzare la situazione prima di prendere decisioni, sempre secondo il consiglio del medico.



Glucosio in rapido aumento (più di 2 mg/dL al minuto)



Glucosio in aumento (tra 1-2 mg/dL al minuto)



Glucosio in lenta modifica (meno di 1 mg/dL al minuto)




Glucosio in diminuzione (tra 1-2 mg/dL al minuto)



Glucosio in rapida diminuzione (più di 2 mg/dL al minuto)


Rapporti dettagliati sul glucosio disponibili sul tuo cellulare

Rivedere e comprendere lo storico del glucosio può essere un aiuto per migliorare il controllo glicemico¹. I rapporti sul glucosio possono fornire informazioni dettagliate sui tuoi livelli di glucosio. Ecco come:

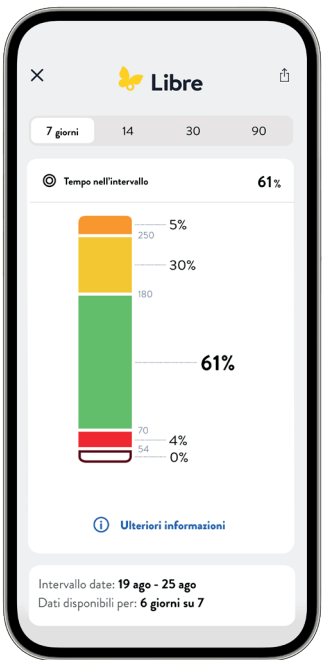

Tempo nell'intervallo

Mostra la percentuale di tempo in cui i valori del glucosio rilevati dal sensore sono stati al di sopra, al di sotto o nell'intervallo stabilito del glucosio. Le raccomandazioni indicano di passare il **70% del tempo tra 70-180 mg/dL**.

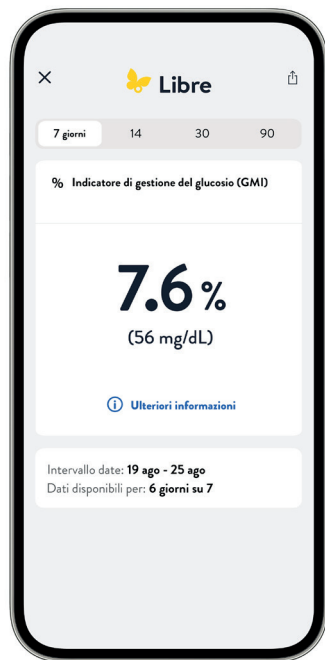

GMI (Indicatore di gestione del glucosio)

Può essere un aiuto per valutare la variabilità glicemica.



Media del glucosio

Visualizza informazioni sui valori medi del glucosio, compresa la media per diversi periodi del giorno. I valori al di sopra dell'intervallo stabilito del glucosio sono di colore **giallo** o **arancione**, mentre quelli al di sotto dell'intervallo stabilito sono di colore **rosso**.

Sono disponibili altri rapporti, quali **Andamento giornaliero**, **Eventi di glucosio basso** e **Diario**. Tocca l'icona Indicatori nella barra di navigazione dell'app per visualizzare tutti i rapporti.

Con le **letture del glucosio in tempo reale**, tutti i valori del glucosio vengono visualizzati nel **Report grafico giornaliero**. Solo quando sono associati ad una nota o quando si effettua una scansione, saranno **memorizzati** anche nel **Diario**.

% di tempo da trascorrere all'interno dell'intervallo stabilito su consiglio del medico:

1. Seguire sempre i consigli del proprio medico.

Allarmi opzionali del glucosio in tempo reale semplici da attivare e da impostare

Gli allarmi opzionali del glucosio ti avvisano quando i tuoi valori sono troppo alti o troppo bassi e sono personalizzabili. Per ricevere gli allarmi, il **Bluetooth e le notifiche devono essere abilitati** e il cellulare deve trovarsi a una distanza massima di 10 metri dal sensore, in assenza di ostacoli.

- 1

Vai al **Menu principale** dell'app, tocca **Allarmi** e segui la **procedura guidata, acconsentendo a tutte le richieste**
- 2

Seleziona l'allarme che desideri impostare e attivalo:
Glucosio alto, Glucosio basso, Perdita di segnale

15:07

← Allarme glucosio basso

ATTIVO

ALLARME

Quando il glucosio scende al di sotto 70 mg/dL >

SUONO

Tono allarme Personale >

Ignora Non disturbare DISATTIVO

Da ATTIVARE se si desidera che l'allarme emetta sempre un suono anche quando lo smartphone è silenziato o l'opzione Non disturbare è attivata.

Toccare per modificare il valore del glucosio ed essere avvisato nel momento in cui supera il livello impostato

Tocca per attivare

Tocca per cambiare il suono dell'allarme. Standard corrisponde al suono delle notifiche del cellulare

Seleziona Ignora non disturbare se desideri ricevere sempre gli allarmi anche quando il cellulare è silenzioso o è in modalità Non disturbare

Indice

Indicatori

Allarmi

Profilo

Con l'app Libre sono disponibili anche gli allarmi predittivi. È possibile ricevere **allarmi anticipati** - fino a 30 minuti prima - quando si prevede che il livello di glucosio scenda al di sotto del limite minimo impostato. Gli allarmi predittivi sono disponibili solo quando l'allarme di glucosio basso è stato attivato.

Allarme predittivo di Glucosio Basso Ora

Si prevede che il tuo livello di glucosio scenda al di sotto di 70 mg/dL entro 20 minuti.

Le impostazioni degli allarmi corrispondono alle impostazioni di suono e vibrazione del tuo cellulare

NB. Per ricevere gli allarmi l'applicazione Libre deve rimanere aperta in background.

I miei valori di glucosio alto e basso per gli allarmi consigliati dal medico:

- Allarme di glucosio alto
- Allarme di glucosio basso

È semplice condividere con il medico i tuoi valori del glucosio per visite da remoto o di persona



LibreView¹ è una piattaforma basata su cloud, un aiuto per il personale medico per migliorare la gestione del diabete, anche a distanza, grazie alla visualizzazione degli andamenti e i profili del tuo glucosio.

Per iniziare tocca **Profilo** nella barra di navigazione dell'app e seleziona **App connesse**.



INSERIMENTO ID STUDIO MEDICO LIBREVIEW

Chiedi al tuo medico o al personale sanitario di fornirti l'ID studio medico LibreView, un codice specifico assegnato allo studio del tuo medico.

Seleziona **Aggiungi studio** nella sezione LibreView e inserisci l'ID studio.


Tocca **Avanti** e poi **Connetti** dopo aver verificato i dati di contatto del tuo medico.
ID studio medico LibreView del mio medico:

1. Il software di gestione dei dati LibreView è destinato ad essere utilizzato sia dai pazienti che dagli operatori sanitari per assistere le persone affette da diabete e i loro operatori sanitari nella revisione, nell'analisi e nella valutazione dei dati storici del glucosio a sostegno di una gestione efficace del diabete. Il software LibreView non è destinato a fornire decisioni terapeutiche o ad essere utilizzato come sostituto della consulenza sanitaria professionale.

È facile condividere i tuoi livelli del glucosio con i tuoi cari

LibreLinkUp

Con l'app LibreLinkUp¹, i tuoi cari hanno **accesso ai tuoi valori del glucosio in qualsiasi momento**. I tuoi familiari possono scaricare l'app gratuita LibreLinkUp su App Store e Google Play sul loro cellulare e personalizzare le notifiche degli allarmi².

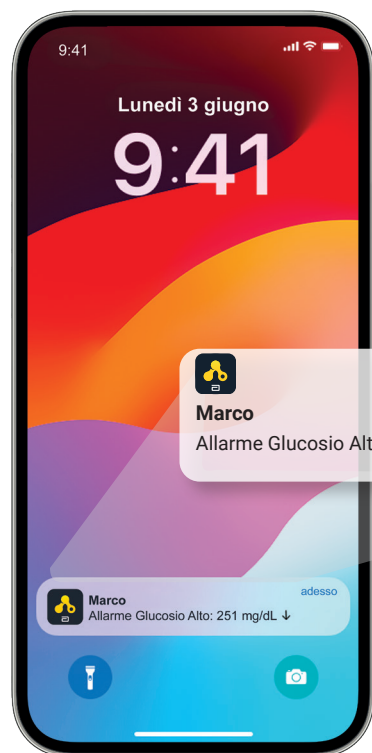

I familiari possono ricevere una notifica nel momento esatto in cui il tuo glucosio supera il livello che hanno impostato nell'app LibreLinkUp.

Per condividere i tuoi livelli di glucosio con un familiare o una persona cara segui questi passaggi:

- 1 Apri l'app Libre
- 2 Clicca su "Profilo" nella barra di navigazione
- 3 Seleziona "App connesse"
- 4 Clicca su "Aggiungi collegamento"
- 5 Nella sezione "Aggiungi collegamento" inserisci il nome, cognome e l'email della persona con cui vuoi condividere i tuoi valori del glucosio
- 6 Clicca su "Invita contatto"
- 7 La persona riceverà un invito via email a scaricare l'app LibreLinkUp e a connettersi

Puoi condividere i tuoi livelli di glucosio con un massimo di 20 persone attraverso LibreLinkUp.

¹ L'applicazione LibreLinkUp è compatibile solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, consultare il sito www.librelinkup.com prima di utilizzare l'applicazione. L'uso di LibreLinkUp richiede la registrazione a LibreView. L'applicazione mobile LibreLinkUp non è destinata a essere un sistema di monitoraggio primario del glucosio: gli utenti domestici devono consultare i loro dispositivi primari e rivolgersi a un professionista sanitario prima di effettuare qualsiasi interpretazione medica e aggiustamento della terapia sulla base delle informazioni fornite dall'applicazione.

² Gli allarmi del glucosio vengono trasferiti all'app LibreLinkUp quando gli utenti sono collegati e gli allarmi sono abilitati sull'app Libre.

Suggerimenti per migliorare l'adesione del sensore



Ricordati

Segui attentamente i consigli per la preparazione della pelle e l'applicazione del sensore.



Proteggi il sensore

Se il sudore allenta il sensore, applica un adesivo cutaneo[†]. Considera di utilizzare un bendaggio per proteggere il sensore durante gli sport di contatto.



Abbigliamento

Indossa indumenti comodi e di tessuti leggeri. Quando ti vesti o ti spogli, fai con calma. In questo modo eviterai il rischio di distacco accidentale del sensore.



Evita gli urti

Attento a non urtare il sensore contro porte, portiere, cinture di sicurezza e spigoli. Cerca di toccare il meno possibile il sensore quando lo indossi.




Asciugati bene

Dopo la doccia o una nuotata*, presta attenzione con l'asciugamano per evitare di rimuovere il sensore.



Rimuovere il sensore se si è sottoposti a esami radiologici: TAC, RX e risonanza magnetica.

Prodotti che possono migliorare l'adesione**

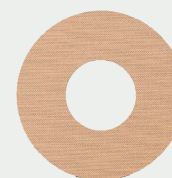

Prodotti di rinforzo

Cerotti, adesivi, nastro kinesiologico o bendaggi per uso medico[†].

Salviette per barriere di protezione

Favoriscono l'adesione di cerotti e pellicole adesive alla pelle.

Barriere "adesive" per la pelle

Ipoallergeniche e prive di lattice.

Adesivi liquidi

Non irritanti e non idrosolubili che fissano le medicazioni.

Pellicole trasparenti

Possono fornire una protezione supplementare.

* Il sensore FreeStyle Libre 3 Plus è resistente all'acqua fino a 1 metro di profondità. Non immergerlo per più di 30 minuti.

**La disponibilità dei prodotti può variare in base al paese e alla regione. Attenersi alle istruzioni per l'uso del fabbricante di ogni prodotto.

[†] Se si desidera coprire il sensore con un bendaggio, questo deve essere applicato al momento dell'applicazione del sensore. L'apertura/foro al centro del sensore non deve essere coperto. È consentito applicare ulteriori bende/nastri adesivi per uso medico; una volta applicati, non è consentito rimuoverli fino a quando il sensore non sarà rimosso.

Rimozione e sostituzione del sensore

Il sensore è studiato per essere indossato fino a 15 giorni.

Ecco come rimuovere, sostituire e smaltire correttamente il sensore FreeStyle Libre 3 Plus.

RIMOZIONE DEL SENSORE

L'app ti informerà quando è il momento di rimuovere il sensore. Solleva il bordo dell'adesivo che tiene il sensore attaccato alla pelle. Allontana con delicatezza il sensore dal corpo con un unico movimento.

SOSTITUZIONE DEL SENSORE

Dopo 15 giorni di utilizzo, **il sensore smette automaticamente di funzionare** e deve essere sostituito. Ricordati di scegliere un punto diverso sulla parte posteriore del braccio per applicare un altro sensore. Puoi ad esempio alternare le braccia. Questo aiuterà ad evitare l'irritazione della pelle.

Smaltimento del sensore:

Il sensore deve essere smaltito in conformità a tutte le normative locali applicabili relative allo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettroniche, batterie, strumenti acuminati o taglienti e materiali potenzialmente esposti a fluidi corporei.



Il sensore deve essere sostituito anche se appaiono irritazioni o si percepisce disagio nel sito di applicazione o se la app segnala un problema con il sensore attualmente in uso.

L'esercizio fisico intenso potrebbe allentare il sensore a causa di sudore o movimenti del sensore. Il test tramite puntura del dito e con un glucometro è necessario quando le letture [e gli allarmi] non corrispondono ai sintomi o ai valori attesi. Se il sensore si è allentato si raccomanda al paziente di sostituirlo.



Per imparare ad utilizzare al meglio i sistemi FreeStyle Libre e le app Libre e LibreLinkUp puoi iscriverti gratuitamente al programma "My FreeStyle" sul sito FreeStyle.Abbott e:

- iscriverti ai webinar tenuti da Abbott;
- approfondire contenuti sul diabete;
- ricevere aggiornamenti sulla tua email.



Inquadra il QR code, crea il tuo account e scopri tutti i contenuti gratuiti che abbiamo pensato per te



Visita il nostro sito FreeStyle.Abbott:

- Puoi accedere alla sezione “Supporto/Tutorial” per scaricare i materiali informativi e visualizzare i video su come utilizzare al meglio il sistema FreeStyle Libre 3



- Puoi richiedere la sostituzione del sensore compilando il modulo online presente nella sezione “Supporto”

Il mio account LibreView

Mail:

Pwd:

Hai bisogno di assistenza telefonica?

- Puoi contattare il servizio clienti per assistenza tecnico-addestrativa al numero verde gratuito attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18

Numero Verde

800-088244

- Puoi contattare il servizio clienti per ricevere assistenza tecnica sulle app Libre e LibreLinkUp al numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Numero Verde

800-693000

Immagini unicamente a scopo illustrativo. Non rappresentano pazienti e dati reali. Il test tramite puntura del dito e con un glucometro è necessario quando le letture e gli allarmi non corrispondono ai valori attesi. Il sistema FreeStyle Libre 3 include i sensori FreeStyle Libre 3 Plus e FreeStyle Libre 3, l'app Libre e il lettore FreeStyle Libre 3. Il sensore FreeStyle Libre 3 Plus è approvato a partire dai 2 anni di età e ha una durata fino a 15 giorni di utilizzo. Il sensore FreeStyle Libre 3 è approvato a partire dai 4 anni di età e ha una durata fino a 14 giorni di utilizzo. Per i bambini di età compresa tra i 2 e 12 anni, un assistente di almeno 18 anni è responsabile della supervisione, della gestione e dell'assistenza nell'uso del sensore FreeStyle Libre 3 Plus. Per i bambini di età compresa tra i 4 e 12 anni, un assistente di almeno 18 anni è responsabile della supervisione, della gestione e dell'assistenza nell'uso del sensore FreeStyle Libre 3. FreeStyle Libre 3 Plus, FreeStyle Libre 3, Libre e LibreView sono dispositivi medici CE 2797. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. © 2026 Abbott. Tutti i Diritti Riservati. Libre, il logo a farfalla, l'involucro e la forma del sensore, il colore giallo e i relativi marchi e/o design sono proprietà intellettuale del gruppo Abbott in vari territori. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Aut. Min. Sal. del 27/07/2026 - ADC-2697798 v1.0