



Descoperiți sistemul FreeStyle Libre 2.

Un ghid scurt cu ajutorul
căruia să puteți începe.



Imaginile sunt doar în scopuri ilustrative. Fără date sau pacienți reali.
Aplicația FreeStyle LibreLink este compatibilă numai cu anumite dispozitive mobile și sisteme de operare. Înainte de a utiliza aplicația, verificați site-ul web pentru mai multe informații despre compatibilitatea dispozitivului. Utilizarea FreeStyle LibreLink poate necesita înregistrarea în LibreView.

SISTEM FREESTYLE LIBRE 2

Descoperiți sistemul Freestyle Libre 2.




1 Aplicator

Utilizat pentru a aplica senzorul.



2 Senzor Libre 2 Plus

Purtat pe partea din spate a brațului.

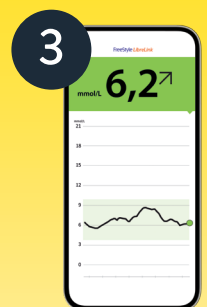

3 Aplicația LibreLink

Utilizați smartphone-ul pentru a vedea datele.¹ aplicația LibreLink este **gratuită** pentru descărcare.²

O modalitate revoluționară de a vă verifica nivelurile glicemiei și de a urmări evoluția acesteia.



Rezultate în timp real ale glicemiei

Vedeți valorile glicemiei pe smartphone¹, actualizate automat³ la fiecare minut.




Ușor de utilizat

Ușor de aplicat și confortabil⁴ de purtat timp de până la 15 zile.



Fără înțepături în deget⁵

Spuneți adio înțepăturilor în deget⁵, cu o monitorizare continuă a glicemiei de până la 15 zile.

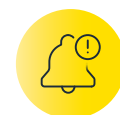

Alarme opționale pentru glucoza serică

Rămâneți cu un pas înainte cu alarmele personalizabile de la minut la minut⁶.

Imaginile sunt doar în scopuri ilustrative. Fără date reale ale pacienților.

1. Aplicația FreeStyle LibreLink este compatibilă numai cu anumite dispozitive mobile și sisteme de operare. Înainte de a utiliza aplicația, verificați site-ul web pentru mai multe informații despre compatibilitatea dispozitivului. Utilizarea FreeStyle LibreLink poate necesita înregistrarea în LibreView. 2. Pentru a descărca aplicația FreeStyle LibreLink și a partaja date despre glucoză, este necesară o conexiune wireless la internet sau o conexiune de date mobile. 3. Rezultatele glucozei sunt afișate automat în aplicația FreeStyle LibreLink numai atunci când smartphone-ul și senzorul sunt conectate și în raza de acțiune. 4. Haak, T. *Diabetes Ther* (2017); <https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6>. 5. Înțepăturile în deget sunt necesare dacă rezultatele glucozei și alarmele nu se potrivesc cu simptomele sau așteptările dvs. 6. Notificările vor fi primite numai atunci când alarmele sunt activate, iar senzorul nu este obstrucționat de dispozitivul de citire pe o rază de 6 metri (20 ft).

SISTEM FREESTYLE LIBRE 2

Trei pași pentru aplicarea senzorului și menținerea senzorului în poziție.

1



Spălați, curățați și uscați

Alegeți o suprafață pe partea din spate a brațului care rămâne netedă în timpul activității obișnuite. Curățați pielea cu apă și **săpun fără parfum, care nu hidratează**. Utilizați un șervețel cu alcool pentru a curăța pielea și **lăsați-o să se usuce la aer** înainte de a continua.

2



Pregătiți aplicatorul

Deșurubați capacul aplicatorului senzorului. **Aliniați marcajul închis la culoare** de pe aplicatorul senzorului cu marcajul închis la culoare de pe ambalajul senzorului. **Apăsați ferm** și apoi ridicați. **Notă:** NU puneți la loc capacul aplicatorului, deoarece acest lucru poate deteriora filamentul senzorului.

3



Aplicați

Aplicați senzorul pe spatele brațului, apăsând ferm. **Așteptați să auziți un clic**. Așteptați câteva secunde și trageți ușor înapoi, lăsând senzorul pe piele. Este atât de ușor!



Nu vă grăbiți

Aveți grijă să nu vă prindeți senzorul în tocul ușii, în ușa mașinii, în centura de siguranță sau în marginile mobilierului.



Uscați prin tamponare

După duș sau înot, aveți grijă la ștergerea cu prosopul pentru a evita prinderea sau scoaterea senzorului.



Sporturi de contact și exerciții grele

Alegeți un loc pe spatele brațului în care riscul de lovire este minim.



Încetiniți

Atunci când vă îmbrăcați sau vă dezbrăcați, aveți grijă să nu vă prindeți lenjeria de corp de senzor.



Ținută de succes

Încercați să lăsați senzorul să respire purtând haine largi și din materiale ușoare.



Nu atingeți

Încercați să nu vă jucați cu senzorul, să nu-l trageți și să nu-l atingeți în timp ce îl purtați.

Înainte să aplicați senzorul:


- Asigurați-vă că alegeți un loc de aplicare corespunzător - spatele brațului dumneavoastră.
- Nu utilizați loțiune de corp sau cremă în cazul în care veți aplica senzorul, deoarece acestea pot lăsa un reziduu uleios pe piele.
- Radeți părul în exces de pe braț, deoarece se poate prinde între adezivul senzorului și piele.

SISTEM FREESTYLE LIBRE 2

Înțelegerea valorilor glicemiei dvs.

De ce citirile senzorului Libre 2 Plus sunt uneori diferite de testul de glicemie prin înțeparea degetului?

Atunci când aplicați senzorul Libre 2 Plus pe partea din spate a brațului, un filament subțire este introdus sub piele. Nu ajunge în fluxul sanguin, ci măsoară variațiile nivelului de glucoză din zona situată imediat sub suprafața pielii, în jurul celulelor, numită lichid interstițial. Valorile glucozei măsurate de senzor și cele ale glicemiei măsurate în același timp pot să nu coincidă întotdeauna, deoarece senzorul măsoară glucoza din lichidul interstițial, nu glicemia.¹

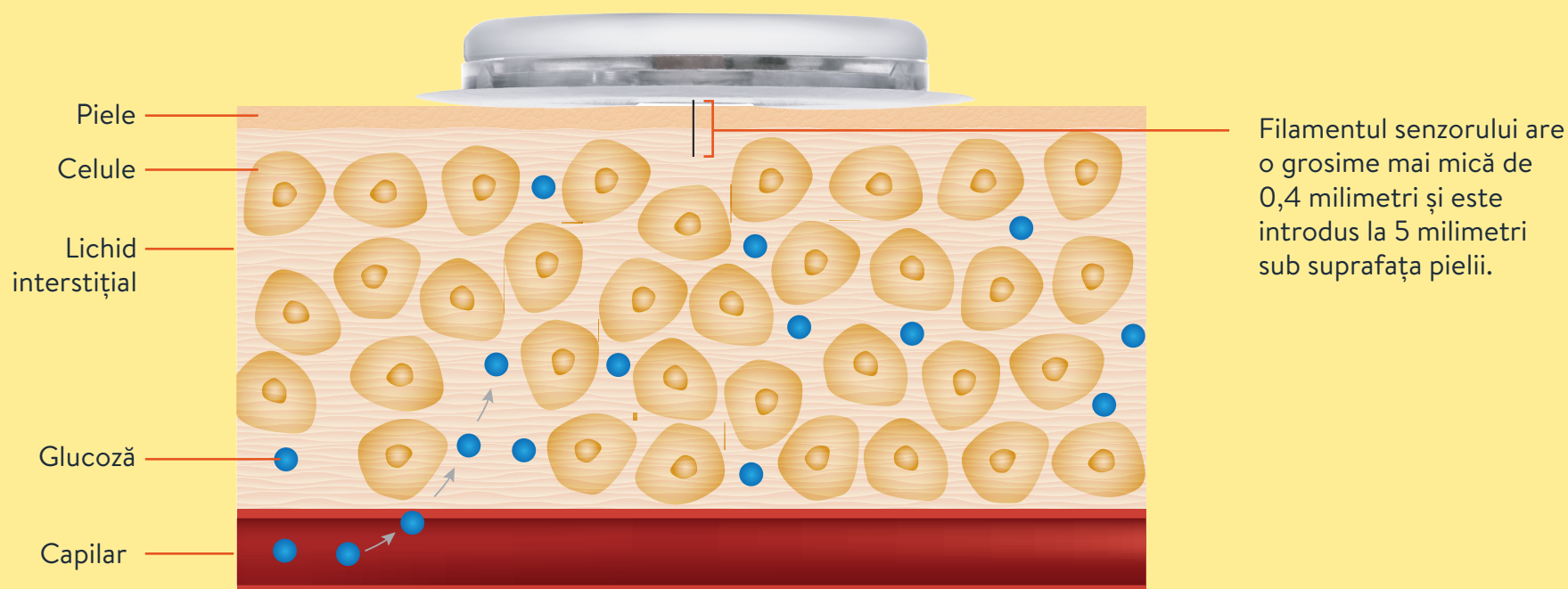


1. Tarini, C. "The Technology of Glucose Sensors." In *Glucose Sensor Use in Children and Adolescents*, pp. 7-12. Springer, Cham, 2020.

SISTEM FREESTYLE LIBRE 2

Vizualizarea datelor dvs. privind nivelul de glucoză.

Aplicația LibreLink¹ este concepută pentru a primi automat² citiri ale glucozei în fiecare minut de la senzorul Libre 2 Plus, dar puteți scana în continuare oricând³, chiar și în timpul unei pierderi de semnal. O scanare rapidă poate completa până la 8 ore de date lipsă, astfel încât să aveți o imagine întreagă a tendințelor și tiparelor glicemiei.

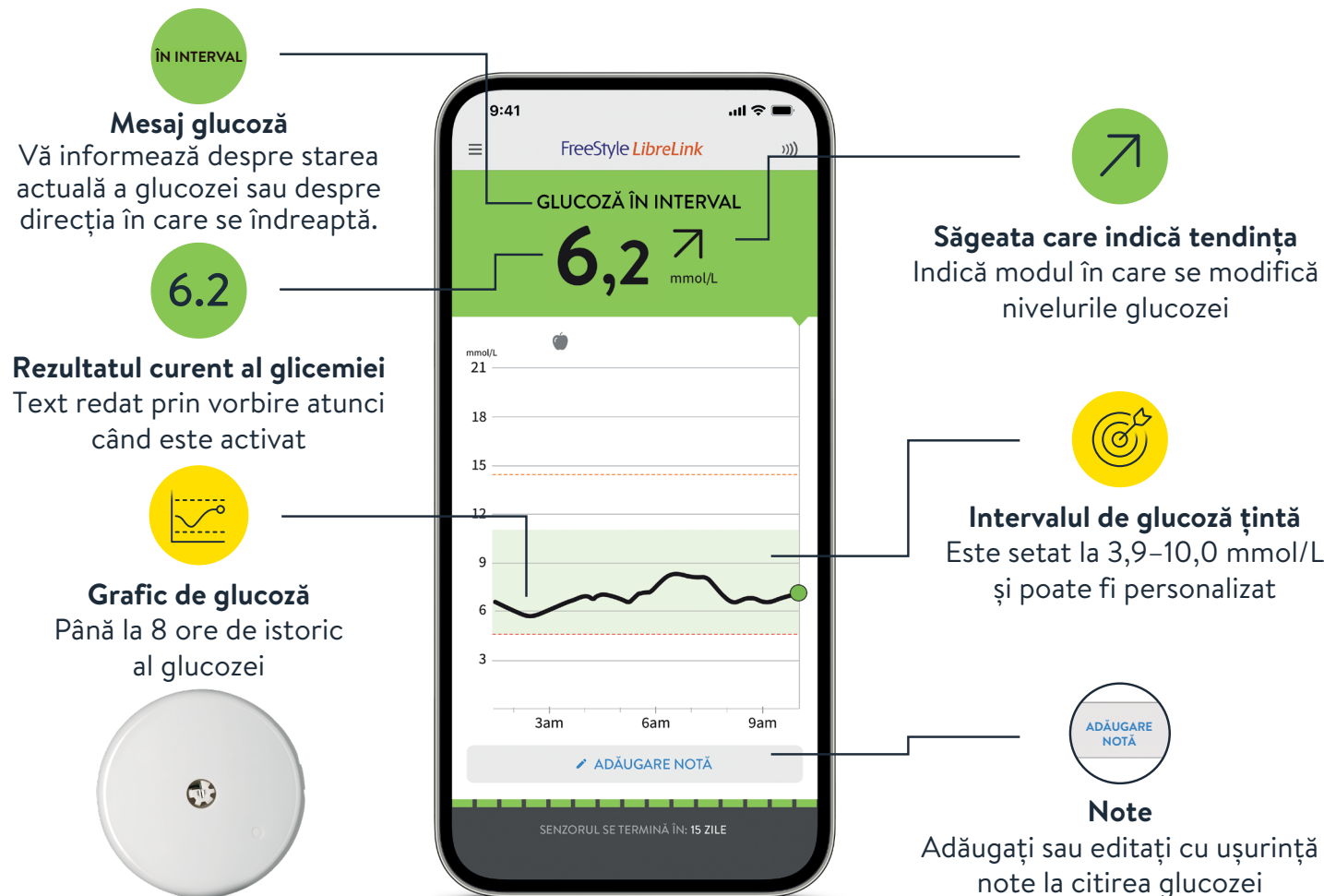

Imaginile sunt doar în scopuri ilustrative. Fără date reale ale pacienților.

1. Aplicația FreeStyle LibreLink este compatibilă numai cu anumite dispozitive mobile și sisteme de operare. Înainte de a utiliza aplicația, verificați site-ul web pentru mai multe informații despre compatibilitatea dispozitivului. Utilizarea FreeStyle LibreLink poate necesita înregistrarea în LibreView. 2. Rezultatele glucozei sunt afișate automat în aplicația FreeStyle LibreLink numai atunci când smartphone-ul și senzorul sunt conectate și în raza de acțiune. 3. Încălzire de 60 de minute necesară la aplicarea senzorului.

SISTEM FREESTYLE LIBRE 2

Mai mult Interval de timp, un control mai bun al glucozei.

Sistemul FreeStyle Libre 2 calculează automat procentul de timp petrecut în intervalul țintă, peste sau sub acesta. Timpul în interval este procentul de timp în care nivelurile glucozei se află în intervalul țintă.



Cu fiecare creștere de 10% a Intervalului de timp, nivelul de **HbA1c scade cu 0,8%**¹
HbA1c arată media nivelului de glucoză serică din ultimele 2-3 luni.




Fiecare oră suplimentară din interval are un **impact pozitiv asupra controlului glicemiei**²



Un Interval de timp îndelungat în zona de acțiune **poate reduce complicațiile de sănătate pe termen lung**³



Liniile directoare recomandă să petreceți **cel puțin 70%** din timpul dvs. în intervalul (3,9–10,0 mmol/L)^{2,4}

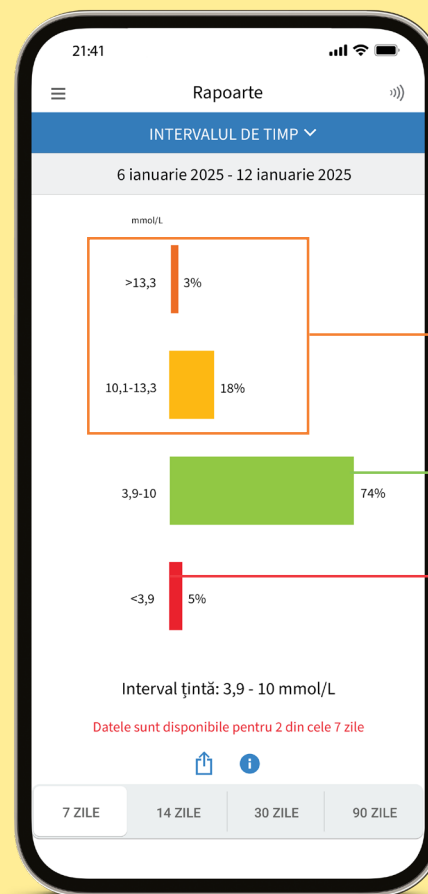

Peste intervalul țintă
(>10,0 mmol/L)

Intervalul de glucoză țintă
(3,9–10,0 mmol/L)

Sub intervalul țintă
(<3,9 mmol/L)

Imaginile sunt doar în scopuri ilustrative. Fără date reale ale pacienților.


HbA1c = hemoglobină glicozilată.

1. Vigersky, RA. *Diabetes Technol Ther* (2019): <https://doi.org/10.1089/dia.2018.0310>. 2. Battelino, T. *Diabetes Care* (2019): <https://doi.org/10.2337/dci19-0028>. 3. Beck, RW. *Diabetes Care* (2019): <https://doi.org/10.2337/dci18-1444>.

Descărcați astăzi.




Scanați codul QR pentru descărcare

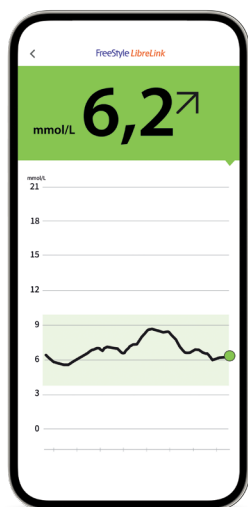

FreeStyle
LibreLink

Vizualizați date în timp real oricând,
'oriunde' cu aplicația LibreLink³.

Datele obținute cu aplicația LibreLink sunt încărcate wireless și automat⁴ în LibreView.⁵

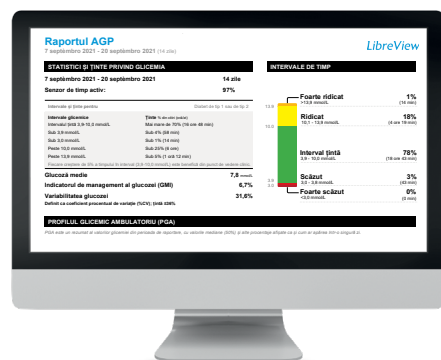

LibreView

O modalitate ușoară de a vizualiza datele
dvs. privind nivelul de glucoză online.

LibreView⁵ vă permite să partajați datele cu profesionistul
din domeniul sănătății cu ușurință atunci când vă conectați
la LibreView Practice al acestuia.



Imaginile sunt doar în scopuri ilustrative. Fără date reale ale pacienților.

1. Încălzire de 60 de minute necesară la aplicarea senzorului. **2.** Senzorul este rezistent la apă până la o adâncime de 1 metru (3 ft). Nu scufundați mai mult de 30 de minute. A nu se utiliza la altitudini de peste 3000 metri. **3.** Aplicația FreeStyle LibreLink este compatibilă numai cu anumite dispozitive mobile și sisteme de operare. Înainte de a utiliza aplicația, verificați site-ul web pentru mai multe informații despre compatibilitatea dispozitivului. Utilizarea FreeStyle LibreLink poate necesita înregistrarea în LibreView. **4.** Partajarea datelor glicemice necesită înregistrarea cu LibreView. Încărcarea automată în LibreView necesită o conexiune la internet wireless sau o conexiune la date mobile. **5.** Software-ul de gestionare a datelor LibreView este destinat atât pacienților, cât și personalului medical, pentru a ajuta persoanele cu diabet și personalul medical să examineze, să analizeze și să evalueze datele istorice înregistrate de dispozitivele de monitorizare a glicemiei, în scopul unei gestionări eficiente a diabetului. Software-ul LibreView nu este destinat să furnizeze decizii de tratament sau să fie utilizat ca un substitut pentru recomandarea profesionistului din domeniul sănătății.



FreeStyle **Libre 2**

Suntem aici pentru a vă ajuta.

Pentru mai multe informații despre sistemul FreeStyle Libre 2, vizitați site-ul nostru web de mai jos pentru resurse utile.

Aflați mai multe la **FreeStyle.Abbott**

Alternativ, ne puteți apela la:

0800 170 1177

De luni până vineri, între orele 8:00 și 20:00

Sâmbătă, duminică și sărbători legale între orele 9:00 și 17:00.

În caz de cădere a senzorului sau mesaje de eroare, puteți utiliza formularul nostru de asistență online scanând aici.



Imaginile sunt doar în scopuri ilustrative. Pacientul nu este real.
© 2026 Abbott. Toate drepturile rezervate. Libre, marca în formă de fluture, forma și aspectul senzorului, culoarea galbenă, precum și mărcile și/sau desenele și modelele asociate constituie proprietatea intelectuală a grupului de companii Abbott în diverse teritorii. Alte mărci sunt proprietatea deținătorilor respectivi. ADC-2687338 v1.0 07/26.


Abbott