

Guía de aplicación y adhesión del sensor

Dónde colocar el sensor



- Seleccione un área plana en **la parte trasera de la parte superior del brazo** (sin flexiones ni dobleces).
- Elija un lugar que se encuentre al menos a 1 pulgada (2.5 cm) **del lugar de la inyección de insulina.**
- Para evitar irritación, recomendamos **mover el siguiente sensor** al otro brazo.

Cómo preparar la piel



1 LAVADO

Solo use jabón sin fragancias ni humectantes para lavar el área donde aplicará el sensor.

2 LIMPIEZA

Use un paño con alcohol para eliminar cualquier residuo oleoso.

3 SECADO

La piel debe estar completamente seca. Tenga cuidado adicional después de ducharse, nadar o ejercitarse.

Consejos de preparación principales para lograr mayor adherencia



HUMEDAD

El área de aplicación debe estar completamente seca.



VELLO

Considere afeitar el área de aplicación.



RESIDUO OLEOSO

El área de aplicación debe estar libre de jabón, loción, champú o acondicionador.

Prepare el sensor

FreeStyle Libre 2

Alinee la marca en el aplicador del sensor con la marca en el paquete del sensor. En una superficie dura, presione firmemente hacia abajo el aplicador del sensor hasta que se detenga.



NOTA: Los códigos del paquete del sensor y del aplicador del sensor deben coincidir o las lecturas de glucosa pueden ser imprecisas.

PRECAUCIÓN: Los aplicadores del sensor contendrán una aguja. No toque el interior del aplicador del sensor ni lo vuelva a colocar en el paquete del sensor.

FreeStyle Libre 3

Desenrosque la tapa del aplicador y déjela a un lado.



Aplicar el sensor

Para aplicar el sensor, presione con firmeza hasta escuchar un clic. Tire hacia atrás lentamente después de unos segundos.

NOTA: La aguja no permanece en su brazo.

Retirar y reemplazar el sensor

- Tire del borde adhesivo y lentamente despéguelo de la piel.
- Puede usar productos con propiedades humectantes para ayudar a retirar el sensor, incluidos aceite para bebé o removedores de adhesivos como Uni-Solve*.
- Para desechar el sensor, siga las regulaciones locales para equipos electrónicos, baterías, objetos punzantes y materiales que estén expuestos a líquidos corporales.

*La información anterior no constituye un aval del fabricante ni de la calidad del producto. Abbott Diabetes Care no es responsable de la integridad o exactitud de la información del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región. Se deben seguir las instrucciones del fabricante para el uso de cada producto.

Consulte la página 4 para obtener información de seguridad importante.

Consejos para mantener el sensor en su lugar



TENGA CUIDADO

Tenga cuidado de no atrapar el sensor con objetos como puertas, puertas de automóviles, cinturones de seguridad y bordes de muebles.



VAYA CON CALMA

Al vestirse o desvestirse, tenga cuidado de no enganchar la ropa interior en el sensor.



SEQUE CON GOLPECITOS

Después de una ducha o de nadar[†], tenga cuidado adicional al secarse con la toalla para evitar enganchar o quitar el sensor.



EVITE RIESGOS

Para los deportes de contacto y el ejercicio intenso, seleccione un lugar para colocar el sensor en la parte posterior del brazo que minimice el riesgo de que el sensor se golpee.



VÍSTASE ADECUADAMENTE

Dé a su sensor espacio para respirar con ropa holgada[§] y materiales livianos.



NO TOQUE EL SENSOR

Intente no jugar con el sensor, no tirar de él ni tocarlo mientras lo usa.

Productos que agregan más adherencia*

SOBREVENDAJE

Un adhesivo, vendaje o cinta adhesiva de grado médico[†]



TEGADERM I.V. (SOBREVENDAJE)

Una película transparente que proporciona una adherencia más potente



TORBOT SKIN TAC™

Una barrera cutánea “adhesiva” hipoalergénica y sin látex



TOALLITAS CON BARRERA PROTECTORA SKIN-PREP®

Apósito líquido protector que permite que la piel respire para que las cintas y películas adhesivas se adhieran mejor



ADHESIVO LÍQUIDO MASTISOL®

Adhesivo líquido transparente, no irritante, no soluble en agua, que asegura los apósitos incluso en áreas húmedas



*La información anterior no constituye un aval del fabricante ni de la calidad del producto. Abbott Diabetes Care no es responsable de la integridad o exactitud de la información del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región. Se deben seguir las instrucciones del fabricante para el uso de cada producto. †Se debe aplicar el sobrevendaje al momento de aplicar el sensor. La abertura/el orificio en el centro del sensor no debe estar cubierto. Se pueden aplicar vendajes/cintas adhesivas adicionales de grado médico, pero no retire los vendajes/las cintas una vez que los aplique hasta que el sensor esté listo para ser retirado. ‡El sensor es resistente al agua hasta 1 metro (3 pies) de profundidad en el agua. No sumergir durante más de 30 minutos. §La aplicación puede capturar datos del sensor cuando se encuentra muy cerca del sensor. La proximidad y orientación de la antena en los teléfonos varía y el teléfono deberá moverse para encontrar la mejor posición para escanear el sensor. Consulte la página 4 para obtener información de seguridad importante.

Estar al tanto de cómo está su glucosa no tiene por qué doler.


El sistema de monitoreo continuo de la glucosa (MCG) FreeStyle Libre 3 muestra lecturas en tiempo real

Puede ver fácilmente sus niveles de glucosa, hacia dónde van y cuáles han sido anteriormente, para tomar decisiones más informadas*1 sin punciones dolorosas en los dedos†.

El medidor de glucosa en sangre (blood glucose meter, BGM) muestra las lecturas en un solo punto en el tiempo

Incluso con varias punciones en los dedos diarias, es posible que no se detecten las mediciones altas y bajas.

El MCG mide los niveles de glucosa a través del líquido intersticial, no a partir de la sangre.

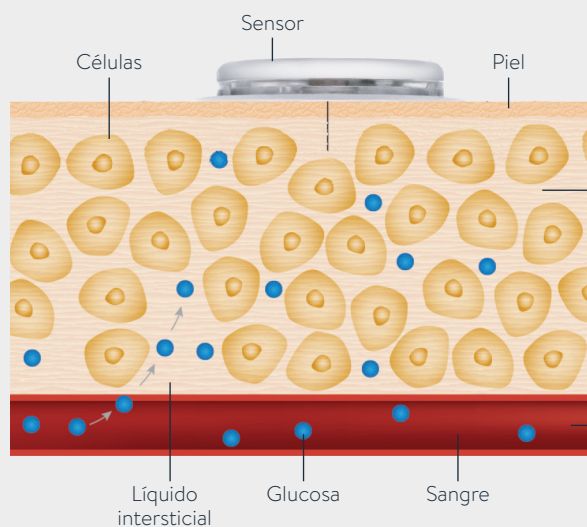

Las lecturas del MCG se toman del líquido intersticial que rodea las células que se encuentran debajo de la piel.

Las lecturas de glucosa en sangre se toman de la sangre mediante punciones en los dedos.

Estamos aquí para ayudarlo. Para obtener más asistencia con la adhesión del sensor, comuníquese con el **equipo de Atención al Cliente de Abbott** al **1-855-632-8658**.

El equipo está disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este, excepto los feriados.

*El estudio se realizó con la versión fuera de los EE. UU. del sistema FreeStyle Libre de 14 días. Los datos se aplican al sistema FreeStyle Libre 3, ya que los conjuntos de funciones son similares al sistema FreeStyle Libre de 14 días, excepto las alarmas. †Las punciones en los dedos son obligatorias si las alarmas y lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas o cuando se ve el símbolo Verificar la glucosa en sangre durante las primeras doce horas.

Referencias: 1. Fokkert, M. *BMJ Open Diabetes Research & Care* (2019). <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2019-000809> 2. Tarini, C. *Glucose Sensor Use in Children and Adolescents* (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-42806-8_2

Información de seguridad importante

Sistema FreeStyle Libre de 14 días: Si no se usa el sistema FreeStyle Libre de 14 días según las instrucciones de la etiqueta, se puede pasar por alto un evento grave de glucosa baja o alta y/o tomar una decisión sobre el tratamiento que podría resultar en una lesión. Si las lecturas no coinciden con los síntomas o las expectativas, utilice el valor de una punción en el dedo con un medidor de glucosa en sangre para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott al 855-632-8658 o visite <https://www.freestyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad.

Sistemas FreeStyle Libre 2 y FreeStyle Libre 3: Si no se usan los sistemas FreeStyle Libre 2 o FreeStyle Libre 3 según las instrucciones de la etiqueta, se puede pasar por alto un evento grave de glucosa baja o alta y/o tomar una decisión sobre el tratamiento que podría resultar en una lesión. Si las alarmas y lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas o las expectativas, utilice el valor de una punción en el dedo con un medidor de glucosa en sangre para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott al 855-632-8658 o visite <https://www.freestyle.abbott/us-en/safety-information.html> para obtener información de seguridad. La carcasa del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott.

© 2024 Abbott. ADC-26872 v4.0