



Mit kleinen Schritten zu großen Erfolgen.

Mit dem FreeStyle Libre 2 System sehen Sie mit einem Blick Ihren aktuellen Zuckerwert, wie er sich entwickelt, und können damit besser nach Ihren Vorstellungen reagieren.

Das ist Fortschritt.

Abbott

Das FreeStyle Libre 2 System

Den Überblick über Ihre Zuckerwerte zu behalten ist einfach!

BEQUEM

Der Sensor misst und speichert Zuckerwerte permanent und automatisch, wenn er am Körper getragen wird. Tag und Nacht bis zu 15 Tage!

EINFACH[1]

Der Sensor kann in Sekundenschnelle gescannt werden oder sogar die Werte automatisch[2] in der Libre App[3] anzeigen.
Sie sehen den aktuellen Zuckerwert, einen Trendpfeil und den Zuckerverlauf der letzten 12 Stunden.

HILFREICH

Sehen Sie wie sich der Zuckerwert bei Sport, Nahrungsaufnahme oder während des Schlafens verändert.

HbA1c-REDUKTION

Durch die Verwendung des FreeStyle Libre 2 Systems kann eine nachweisliche HbA1c-Reduktion festgestellt werden.[4,5]






Der FreeStyle Libre 2 Plus Sensor

Der FreeStyle Libre 2 Plus Sensor unterstützt Sie bei Ihrem täglichen Diabetesmanagement.

Klein und diskret: Der runde Sensor ist ungefähr so groß wie eine 2-Euro-Münze.



Der Sensor misst **automatisch**[2] **jede Minute**[6] Ihren Zuckerwert.

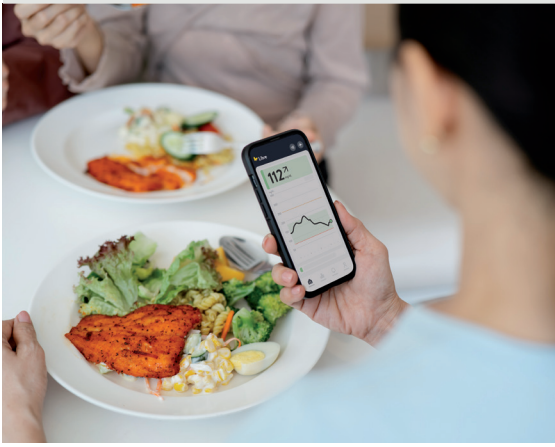

Der Sensor wird ganz einfach auf der **Rückseite des Oberarms** angebracht. Er kann **bis zu 15 Tage** lang getragen werden.



Der Sensor ist **wasserfest** und kann beim Baden, Duschen, Schwimmen und beim Sport getragen werden.[7]



Die Libre App[3]

Mit der Libre App[3] haben Sie Ihre Glukosewerte und weitere hilfreiche Angaben auf Ihrem Smartphone im Blick.


Automatische Übertragung
Bei der Verwendung der App werden Zuckerwerte jede Minute[6] automatisch[2] aktualisiert und direkt auf das Smartphone gesendet.

Interaktive Glukosekurve
Durch einfaches Verschieben entlang der Verlaufskurve können Sie Ihre Glukosedaten detailliert im zeitlichen Verlauf betrachten.

Einfacher Datenaustausch
Von der App aus können Sie Ihre Daten ganz einfach mit Ihrem medizinischen Team über LibreView[8] und Familie oder Freunden über LibreLinkUp[9] teilen[10].

Sprachausgabe
Die Libre App unterstützt integrierte Bedienungshilfen Ihres Smartphones (z. B. VoiceOver oder TalkBack), sodass Glukosewerte und Benachrichtigungen vorgelesen werden können.

Optionale Alarme[11]
Diskrete, ansteigende Alarme, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

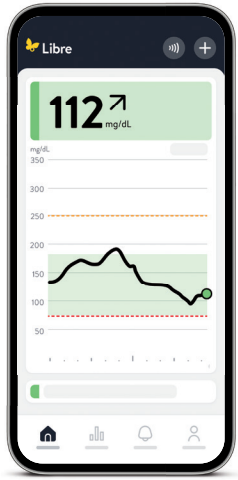


Laden Sie sich jetzt die kostenlose **Libre App[3]** im App Store oder Google Play Store herunter.

Optionale und individuell einstellbare Glukosealarme[11]

Entscheiden Sie selbst über Ihre Alarmgrenzwerte.

- Alarme werden in der Minute ausgelöst, in der Ihr Zuckerwert zu niedrig oder zu hoch ist.
- Einfach ein- und auszuschalten.
- Einfaches Aktivieren von Ton und/oder Vibrationssignal.

Stummschaltung: Alarme können vorübergehend lautlos gestellt werden und erfolgen dann über Vibration[12].

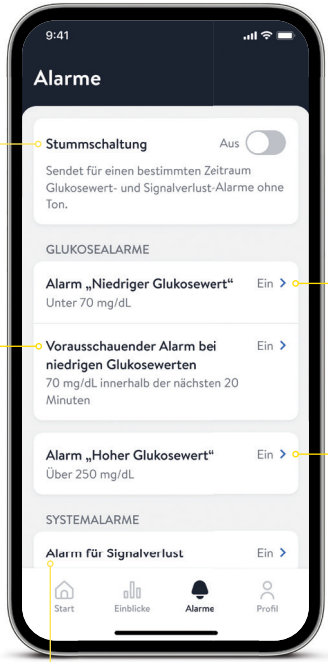

Niedrige Glukosewerte (kann zwischen 60–100 mg/dL eingestellt werden)

Warnung bei vorausschauend niedrigen Werten: Die App warnt Sie frühzeitig, wenn sich Ihre Glukosewerte in Richtung Unterzuckerung entwickeln.

Hohe Glukosewerte (kann zwischen 120–400 mg/dL eingestellt werden)

Signalverlust: Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Smartphone vorübergehend keine Verbindung zum Sensor hat.

Teilen Sie Ihre Zuckerwerte noch einfacher mit der LibreLinkUp App[9]

Lassen Sie Ihre Familie, Freunde oder Angehörige wissen, dass es Ihnen gut geht.

Im Hauptmenü Ihrer Libre App[3] unter dem Punkt „Verbundene Apps“ können Sie bis zu 20 Personen dazu einladen, Ihre Zuckerwerte und Alarme[11] über die kostenlose LibreLinkUp App[13] zu verfolgen.

Ihre Angehörigen bekommen eine E-Mail mit Anweisungen, wie sie die kostenlose LibreLinkUp App[9] installieren können.



Laden Sie sich jetzt die kostenlose **LibreLinkUp App**[9] im App Store oder Google Play Store herunter.

Angehörige können sich darauf verlassen, jederzeit[6] Glukosewerte und Glukosealarme[11] mitverfolgen zu können.

Erfahren Sie noch mehr über Ihren Diabetes mit LibreView[8]

Glukosedaten online analysieren mit LibreView[8].

Das sichere[13], webbasierte Diabetesmanagement-System bereitet Ihre Glukosedaten in anschauliche und leicht verständliche Berichte und Analysen auf.

Außerdem können Sie Ihre Messwerte direkt mit Ihrem medizinischen Fachpersonal teilen[10]. Mithilfe der Berichte von LibreView kann Ihr Diabetesteam besser individuelle Therapieentscheidungen treffen.



Teilen Sie Ihre Glukosedaten ganz einfach mit Ihrer behandelnden Praxis. Verbinden Sie sich dafür direkt mit Ihrem Diabetesteam über die Libre App[3] oder akzeptieren Sie die Praxis-Einladung Ihres medizinischen Fachpersonals.

www.LibreView.com



Libre

Sie haben Fragen?
Unser Kundenservice hilft gerne weiter!

Kundenservice-Nummer für
allgemeine Fragen zum FreeStyle Libre 2 System:

0800 93 00 93

Kostenlos aus dem österreichischen Mobilfunknetz und Festnetz.
Montag bis Freitag (werktags) von 08:00 bis 18:00 Uhr.

Mehr Informationen erhalten Sie unter **www.FreeStyle.Abbott**

Medizinprodukt. Bitte die Gebrauchsanweisung genau beachten.
Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten. Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden.

1 Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. **2** Glukosewerte werden nur dann automatisch an die Libre App übertragen, wenn sich das Smartphone ihrer Patient:innen in der Übertragungsreichweite des Sensors befindet und verbunden ist. **3** Die Libre App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyle.Abbott, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. **4** Evans M et al., Diabetes Ther. 2022. https://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9. **5** Haak, Thomas, et al. Diabetes Therapy. 2017; 8 (1): 55–73.Studie wurde mit 224 Erwachsenen durchgeführt. **6** Der Sensor ist 60 Minuten nach der Aktivierung für die Glukosemessung bereit. **7** Der Sensor ist in bis zu 1 m Wassertiefe für die Dauer von bis zu 30 Minuten wasserfest. **8** LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. **9** Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView. **10** Die Übertragung zwischen den Apps erfordert eine Internetverbindung. **11** Benachrichtigungen werden nur empfangen, wenn die Alarmeinstellungen aktiviert sind und sich der Sensor ohne Hindernisse innerhalb von 10 Metern des Empfangsgeräts befindet. **12** Die Stummschaltung ermöglicht es Nutzer:innen Alarme für Signalverlust und Glukosewerte für bis zu neun Stunden stummzuschalten. Während dieser Zeit sind akustische Alarme deaktiviert, auch wenn die Funktion „Nicht stören überschreiben“ aktiviert ist. Je nach Geräteeinstellungen können weiterhin visuelle Hinweise und Vibrationssignale ausgegeben werden. **13** Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht öffentliches Netzwerk übertragen und auf einer SQL Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-Anbieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Österreich werden die Daten auf Servern in der EU gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer-Account ist passwortgeschützt.

© 2026 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Libre, das Schmetterlingslogo, die Form und das Erscheinungsbild des Sensors, die Farbe Gelb sowie sämtliche damit zusammenhängende Marken und/oder Designs sind das geistige Eigentum der Abbott Unternehmensgruppe in ausgewählten Ländern.
ADC-2693262 v1.0 | August 2026

Abbott