
FreeStyle Libre

Guía de aplicación y adhesión del sensor

Dónde colocar el sensor

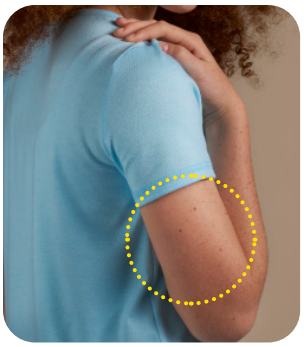

- Seleccione un área plana en la **parte posterior de la parte superior del brazo** (sin doblarla ni flexionarla).
- Elija un lugar que esté al menos a 1 pulgada (2.5 cm) **del lugar de inyección de la insulina**.
- Para evitar que se produzca irritación, recomendamos **colocar el siguiente sensor** en el otro brazo.

Cómo preparar la piel



1. **LAVADO** — Utilice únicamente jabón no hidratante y sin fragancia para lavar el área donde aplicará el sensor.
2. **LIMPIEZA** — Utilice una toallita humedecida con alcohol para eliminar cualquier residuo graso.
3. **SECADO** — La piel debe estar completamente seca. Tenga mucho cuidado después de ducharse, nadar o hacer ejercicio.

Consejos de preparación imprescindibles para una mayor adhesión

HUMEDAD
El área de aplicación debe estar completamente seca

VELLO
Considere afeitar el área de aplicación

RESIDUOS GRASOS
El área de aplicación debe estar libre de jabón, loción, champú o acondicionador

*El sensor es resistente al agua hasta una profundidad de 1 metro (3 pies). No lo sumerja más de 30 minutos.
Consulte la página 4 para obtener información importante sobre seguridad

Prepare el sensor

Sensor FreeStyle Libre 2



Alinee la marca del aplicador del sensor con la marca del envase del sensor. Sobre una superficie dura, presione firmemente el aplicador del sensor hacia abajo hasta que se detenga.

NOTA: Los códigos del envase del sensor y del aplicador del sensor deben coincidir o las lecturas de glucosa pueden ser inexactas.

PRECAUCIÓN: Los aplicadores del sensor contendrán una aguja. No toque el interior del aplicador del sensor ni vuelva a colocarlo en el envase del sensor.

Sensor FreeStyle Libre 3

Desenrosque el tapón del aplicador y déjelo a un lado.





Aplique el sensor

Para aplicar el sensor presione firmemente hasta que escuche un clic. Tire hacia atrás lentamente después de unos segundos.

NOTA: La aguja no queda colocada en el brazo.

Retire y reemplace el sensor

- Tire hacia arriba del borde adhesivo y despéguelo lentamente de la piel.
- Puede utilizar productos con propiedades hidratantes para ayudar a retirar el sensor, incluido aceite para bebés o productos para eliminar adhesivos, como Uni-Solve*.
- Para desechar el sensor, siga la normativa local sobre equipos electrónicos, baterías, objetos punzantes y materiales expuestos a fluidos corporales.

*La información anterior no constituye un respaldo del fabricante ni de la calidad del producto. Abbott Diabetes Care no es responsable de la integridad o exactitud de la información del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región. Se deben seguir las instrucciones de uso del fabricante de cada producto.

Consulte la página 4 para obtener información importante sobre seguridad

Consejos para mantener el sensor en su lugar

TÓMESELO CON CALMA
Tenga cuidado de no atrapar el sensor en objetos tales como marcos de puertas, puertas de automóviles, cinturones de seguridad y bordes de muebles.

HAGA LAS COSAS LENTAMENTE
Al vestirse o desvestirse, tenga cuidado de no atrapar la ropa interior en el sensor.

SECADO CON PALMADITAS
Después de ducharse o nadar‡, tenga especial cuidado al secarse con la toalla para evitar enganchar o arrancar el sensor.

VAYA A LO SEGURO
Para los deportes de contacto y el ejercicio intenso, seleccione un lugar para el sensor en la parte posterior de la parte superior del brazo que minimice el riesgo de que el sensor se desprenda.

VÍSTASE PARA EL ÉXITO
Use ropa holgada§ y materiales ligeros para permitir que el sensor respire.

MANOS FUERA
Intente no jugar con el sensor, ni tirar de él, ni tocarlo mientras lo lleva puesto.

Productos que añaden una mayor adherencia*

VENDAJE PROTECTOR
Un adhesivo de calidad médica; vendaje o cinta adhesiva†



TEGADERM I.V. (VENDAJE PROTECTOR)
Una película transparente que proporciona fuerza adhesiva



TORBOT SKIN TAC™
Una barrera cutánea hipoalergénica y sin látex "pegajosa"



TOALLITAS PROTECTORAS DE BARRERA SKIN-PREP®
Apósito líquido protector que permite que la piel respire para que las cintas y películas se adhieran mejor



ADHESIVO LÍQUIDO MASTISOL®
Adhesivo líquido transparente, no irritante y no soluble en agua que asegura los apósitos incluso en zonas húmedas



*La información anterior no constituye un respaldo del fabricante ni de la calidad del producto. Abbott Diabetes Care no es responsable de la integridad o exactitud de la información del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región. Se deben seguir las instrucciones de uso del fabricante de cada producto. †El vendaje protector debe aplicarse en el momento de la colocación del sensor. La abertura/orificio en el centro del sensor no debe estar cubierta. Se pueden aplicar vendas/cinta de grado médico adicionales, pero no retire las vendas/cinta una vez aplicadas hasta que el sensor esté listo para su extracción. ‡El sensor es resistente al agua en hasta 1 metro (3 pies) de agua. No lo sumerja más de 30 minutos. §La aplicación puede capturar datos del sensor cuando está cerca del sensor. La proximidad y orientación de la antena en los teléfonos varía por lo que habrá que mover el teléfono para encontrar la mejor posición para escanear el sensor.

Consulte la página 4 para obtener información importante sobre seguridad

Controlar los niveles de glucosa no tiene por qué ser una molestia.


El sistema de MCG FreeStyle Libre 3 muestra lecturas en tiempo real

Puede ver fácilmente sus niveles de glucosa, a dónde van y dónde han estado, para tomar decisiones más informadas*[1] sin pinchazos dolorosos en los dedos†.

El BGM muestra lecturas en un momento determinado

Incluso con múltiples pinchazos diarios en el dedo, los valores altos y bajos de glucosa pueden pasar desapercibidos.

El MCG mide los niveles de glucosa a través del líquido intersticial, no de la sangre.

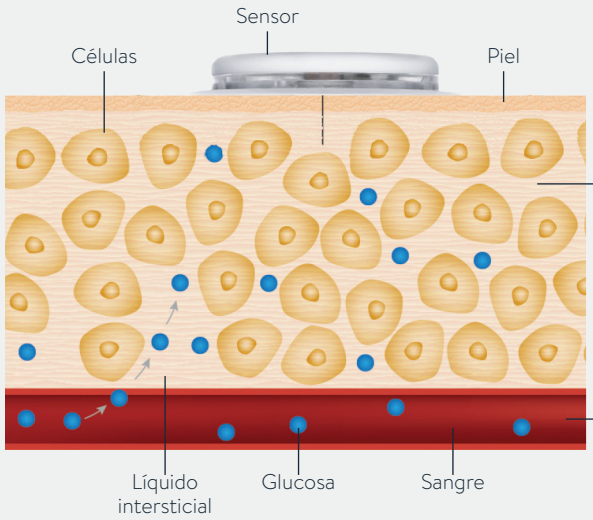

Las lecturas de MCG se obtienen del líquido intersticial que rodea las células debajo de la piel.

Las lecturas de glucosa en sangre se toman de la sangre mediante punción en la punta de los dedos.

Estamos aquí para ayudar. Para obtener más ayuda con la adhesión del sensor, póngase en contacto con el **equipo de atención al cliente de Abbott** llamando al **1-855-632-8658**.

El equipo está disponible los 7 días de la semana de 8 a. m. a 8 p. m. hora del este, excepto por los días festivos.

*El estudio se llevó a cabo con la versión no estadounidense para el mercado internacional del sistema FreeStyle Libre 14 day. Los datos son aplicables al sistema FreeStyle Libre 3, ya que sus funciones son similares a las del sistema FreeStyle Libre 14 day, excepto las alarmas. †Se requieren punciones en el dedo si las alarmas y lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas o si aparece el símbolo de "Comprobar glucosa en sangre" durante las primeras doce horas.

Referencias: 1. Fokkert, M. *BMJ Open Diabetes Research & Care* (2019). **https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-000809**. **2.** Tarini, C. Glucose Sensor Use in Children and Adolescents (2020). **https://doi.org/10.1007/978-3-030-42806-8_2**.

Información importante sobre seguridad

Producto de venta exclusiva con receta médica. Para consultar información importante sobre seguridad, visite **FreeStyleLibre.us**.

La carcasa del sensor, FreeStyle, Libre y las marcas relacionadas son marcas de Abbott.
© 2026 Abbott. ADC-2628317 v5.0

Abbott